

INSTRUCTIONS

Setting Up Your Safe Place Bed



Safe Place
Bedding LLC



Vidéo Youtube :
Configuration de base du Safe Place Bed

1. Chaque lit Safe Place modèle 100 se compose d'une housse en toile avec quatre structures gonflables à l'intérieur, quatre sangles et des instructions.

2. Placez le Safe Place Bed sur un lit fixe, d'au moins 135 cm de large, et dépliez-le. Assurez-vous que le filet de la porte la plus proche de vous est bien visible.




3. Tirez une languette de fermeture éclair hors de la poche en toile et ouvrez la fermeture éclair jusqu'à ce qu'elle soit à 2-3 cm au-dessus de la valve sur le gonflable (n'ouvrez pas complètement la fermeture éclair ou elle sera difficile à fermer après le gonflage) Assurez-vous que la valve noire est complètement insérée dans l'ouverture transparente sans espace.



4. Répétez l'opération pour les quatre côtés du lit Safe Place

5. Gonflez les quatre côtés du lit Safe Place Vous devrez peut-être tenir la pompe à air dans une valve noire. Le lit Safe Place doit être en érection.

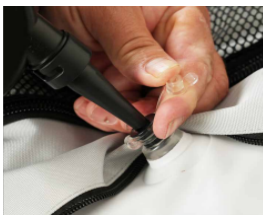

6. Pour sceller le gonflable, insérez le bouchon transparent dans la valve unidirectionnelle noire, puis appuyez sur la valve dans la chambre gonflable. Répétez l'opération pour les quatre vannes. Zippez les quatre chambres fermées et repoussez la languette de fermeture éclair dans la poche en toile.




7. Placez le lit Safe Place au centre du lit fixe. Il doit y avoir au moins 10 cm d'espace entre les bords longs du lit Safe Place et le bord du matelas. Reportez-vous à l'image pour plus d'informations. Un protège-lit pleine longueur doit être utilisé si le lit fixe mesure moins de 135 cm de large.



8. Connectez deux sangles sur le côté long du lit Safe Place. Passez les sangles sous le lit fixe et fixez-les du côté opposé du lit Safe Place. Serrez les sangles – voir l'étape 9 pour plus de détails.

Connectez deux sangles sur le côté court du lit Safe Place. Passez les sangles sous le lit fixe et fixez-les du côté opposé du lit Safe Place. Serrez les sangles. Les sangles doivent former un « hashtag # » sous le lit fixe.

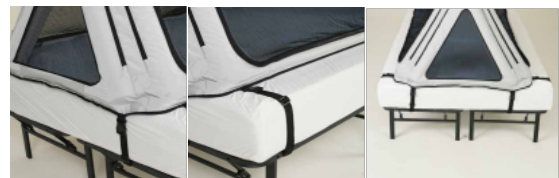

Vidéo YouTube : pliage du lit

9. Retirez le mou de chacune des quatre sangles jusqu'à ce que le lit Safe Place soit fermement fixé au lit fixe. Tirez la sangle au milieu de la boucle, en enlevant le mou au-dessus de la boucle. Pour verrouiller le cerclage en place, tirez sur la queue du cerclage



*Notez qu'il y a deux boucles sur chaque sangle.

Ne pas serrer les sangles peut entraîner des blessures graves. Lors de chaque utilisation, veuillez inspecter les sangles et les boucles pour ne pas les endommager.

Fermeture éclair :

Connectez le fermoir à la languette de la fermeture éclair et serrez la sangle en tissu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre la languette de la fermeture éclair et le chiffon.

Lors du gonflage et du dégonflage du lit, assurez-vous que les portes sont fermées et verrouillées.



Contrôles quotidiens lors de l'utilisation du Safe Place Bed

Avant d'utiliser le Safe Place Bed, vérifiez qu'il n'y a pas d'imperfections dans le grillage.

- Serrez les quatre structures gonflables pour vous assurer qu'elles sont toujours gonflées. Si une chambre est dégonflée, retirez le bouchon transparent et la valve unidirectionnelle noire de l'ouverture en plastique transparent, nettoyez, séchez, remplacez et regonflez. N'utilisez pas le lit pendant 24 heures pour vous assurer que le gonflable retiendra l'air. S'il se dégonfle à nouveau, contactez le service client.
- Tirez sur les quatre sangles pour vous assurer que chaque sangle est bien serrée et vérifiez que le lit Safe Place se trouve au centre du lit fixe.
- Vérifiez que la fermeture éclair fonctionne correctement lorsque vous fermez la porte.
- Vérifiez le verrou de la fermeture éclair et serrez-le si nécessaire.
- S'il y a des problèmes avec l'un des éléments ci-dessus, n'utilisez pas le lit Safe Place et contactez le service client.

Nettoyage:

- Nettoyez le lit avec de l'eau tiède. N'utilisez pas de détergent à lessive car cela enlèverait le revêtement imperméable sur le tissu.

Changement d'une chambre gonflable :



Vidéo YouTube :
Changement des chambres

Pour changer la chambre d'extrémité (triangle)

- Ouvrez les deux fermetures éclair et dégonflez le gonflable.
- Retirez le gonflable de la housse en toile.
- Inversez le processus pour remplacer la chambre gonflable, en vous assurant que la vanne pointe vers l'extérieur.



Pour changer la chambre longue (rectangle) :

- Ouvrez complètement les deux fermetures éclair et dégonflez le gonflable.
- Poussez la chambre gonflable le long du haut de la cavité en toile.
- Déplacez-vous du côté opposé du lit Safe Place et tirez la chambre gonflable à travers
- Inversez le processus pour remplacer la chambre gonflable, en vous assurant que la vanne pointe vers l'extérieur.



Avertissements:

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison des petites pièces et du risque d'étouffement.

Interdiction de fumer ou de sources de chaleur autour des produits. Tenir à l'écart de l'eau, pas d'un dispositif de flottaison. Pas un jouet.

Si un côté du lit se dégonfle, arrêtez d'utiliser le lit.

Gardez les objets pointus à l'écart du produit, les crevaisons ne sont pas couvertes par la garantie et peuvent causer des blessures à l'enfant.

- Se fixe fermement au lit stationnaire lorsqu'il est utilisé, non testé indépendamment.
- Le lit Safe Place mesure 105 cm de large et 190 cm de long et doit être utilisé sur un lit fixe d'au moins 135 cm de large et 190 cm de long.
- Le verrou de la fermeture éclair doit être serré avant utilisation, puis vérifié la nuit pour éviter de se coincer.
- Surveillez de près l'utilisateur lorsque l'utilisateur ou d'autres personnes ont accès à l'extérieur du lit Safe Place, les risques peuvent inclure, mais sans s'y limiter, l'étranglement par les sangles, l'étouffement avec la fermeture éclair et le piégeage.
-

