




## LIT SAFE PLACE INSTRUCTIONS



**AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION: UTILISEZ UN CHIFFON HUMIDE POUR ESSUYER DÉLICATEMENT LES PARTIES TRANSPARENTES, NOIRES ET BLANCHES DE CHAQUE VALVE.**

### ÉTAPE 1

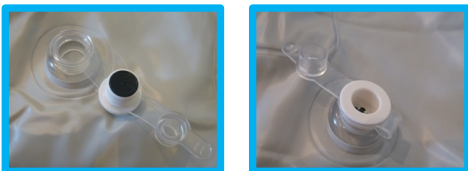

Gonflez et dégonflez le Safe Place Bed avec les fermetures éclair fermées et verrouillées.

Placez le Safe Place Bed sur un lit fixe d'au moins 190 cm de long et 135 cm de large.

Insérez la valve blanche dans le trou en plastique transparent. Assurez-vous qu'il est bien inséré. Répétez l'opération pour les quatre valves.

### ÉTAPE 2



Gonflez les quatre sections du lit Safe Place. Chaque partie gonflable du lit doit être ferme, mais pas dure.

Attention à ne pas trop gonfler le lit, cela annulerait la garantie !

### ÉTAPE 3



Poussez le bouchon transparent jusqu'au bout dans la valve blanche, puis faites glisser l'ensemble de la valve dans le Safe Place Bed.

Répétez l'opération pour les quatre valves

### ÉTAPE 4



Vérifiez que le Safe Place Bed se trouve au milieu du lit fixe. Connectez un bracelet blanc à un clip blanc. Passez la sangle sous le lit fixe et connectez le clip blanc de l'autre côté du Safe Place Bed.

Répétez l'opération à l'extrémité opposée du lit Safe Place. Serrez les sangles blanches jusqu'à ce que le Safe Place Bed ne puisse pas bouger ou basculer.

## FERMETURE À GLISSIÈRE



Fermez les fermetures éclair à l'extrémité du lit avec le clip de fermeture éclair. Attachez le clip aux deux fermetures éclair et tirez fermement sur la sangle pour que les fermetures éclair ne puissent pas être déplacées.

## INSPECTION QUOTIDIENNE DU SAFE PLACE BED AVANT UTILISATION

1. Inspectez le Safe Place Bed tous les jours avant d'y placer l'enfant :
2. Effectuez une inspection visuelle pour vérifier que le lit Safe Place se trouve au milieu du lit fixe et que le grillage est intact.
3. Effectuez une inspection manuelle :
  - i. Pressez chaque partie du lit pour vous assurer qu'il est toujours gonflé. Si une section s'est vidée d'air, nettoyez les trois sections de la vanne et gonflez-la à nouveau. N'utilisez pas le lit pendant 24 heures pour vous assurer que la section retient l'air. Si la section se dégonfle à nouveau, contactez [safeplacebedseu@gmail.com](mailto:safeplacebedseu@gmail.com)
  - ii. Tirez chaque sangle blanche à la main pour vous assurer qu'elle est bien serrée et que le lit Safe Place reste au milieu du lit fixe.
  - iii. Tirez sur la fermeture éclair lors de la fermeture du lit Safe Place.
4. Si vous constatez un problème, n'utilisez pas le lit et contactez [safeplacebedseu@gmail.com](mailto:safeplacebedseu@gmail.com)

## RESTEZ EN SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE COFFRE-FORT PLACE BED

1. Vérifiez que le coffre-fort n'est pas endommagé chaque fois que vous l'utilisez.
2. Parlez à votre médecin avant d'utiliser un lit Safe Place si votre enfant a moins de 36 mois ou a un faible tonus musculaire. Risque d'étouffement.
3. Veuillez surveiller de près l'enfant/l'utilisateur lorsque vous accédez à l'extérieur du lit Safe Place. Le risque peut inclure, mais sans s'y limiter, l'étouffement par les sangles, l'étouffement sur la fermeture éclair.
4. Il est interdit de fumer ou de trouver des sources de chaleur à proximité de Safe Place Bed
5. Gardez le Safe Place Bed à l'écart de l'eau, ce n'est pas un dispositif de flottaison.
6. Gardez les objets pointus à l'écart du Safe Place Bed, les perforations ne sont pas couvertes par la garantie et peuvent blesser l'enfant.
7. Ce produit n'est pas un jouet.
8. Consultez toujours votre médecin avant d'utiliser ce produit

Contactez-nous:

[www.safeplacebedseu.com](http://www.safeplacebedseu.com)

[safeplacebedseu@gmail.com](mailto:safeplacebedseu@gmail.com)

+447782105085