




## CAMA LUGAR SEGURO INSTRUÇÕES



**ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO: USE UM PANO HÚMIDO PARA LIMPAR SUAVEMENTE AS PARTES TRANSPARENTES, PRETAS E BRANCAS DE CADA VÁLVULA.**

### PASSO 1

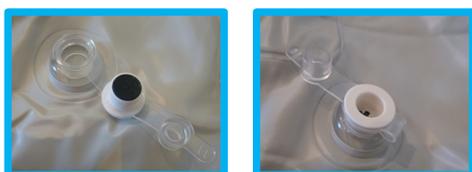

Encha e esvazie a cama Safe Place com zíperes fechados e trancados. Coloque a cama Safe Place numa cama estacionária com pelo menos 190 cm de comprimento e 135 cm de largura. Insira a válvula branca no orifício de plástico transparente. Certifique-se de que está totalmente inserido. Repita para as quatro válvulas.

### 2º PASSO



Encha as quatro secções da Cama Safe Place. Cada parte insuflável da cama deve ser firme, mas não dura. Tenha cuidado para não inflar muito a cama, isso anulará a garantia!

### 3º PASSO



Empurre a tampa transparente até à válvula branca e, em seguida, deslize toda a válvula para a cama de lugar seguro. Repita para as quatro válvulas

### 4º PASSO



Verifique se a cama Safe Place está no meio da cama estacionária. Ligue uma correia branca a um clipe branco. Passe a correia por baixo da cama estacionária e ligue o clip branco do outro lado da cama Safe Place. Repita na extremidade oposta da cama Safe Place. Aperte as correias brancas até que a cama Safe Place não se possa mover ou tombar.

## FECHADURA COM FECHO



Feche os zíperes no final da cama com o fecho de correr. Encaixe o clipe em ambos os zíperes e puxe a alça firmemente para que os zíperes não possam ser movidos.

## INSPEÇÃO DIÁRIA DA CAMA DO LUGAR SEGURO ANTES DO USO

1. Inspeccione a cama do lugar seguro todos os dias antes de colocar a criança nela:
2. Realize uma inspeção visual para verificar se a cama Safe Place está no meio da cama estacionária e se a malha está intacta.
3. Realize uma inspeção manual:
  - i. Aperte cada parte da cama para garantir que ainda está inflada. Se uma secção tiver esvaziado de ar, limpe as três secções da válvula e encha novamente. Não utilize a cama durante 24 horas para garantir que a secção retém ar. Se a secção esvaziar novamente, contacte [safeplacebedseu@gmail.com](mailto:safeplacebedseu@gmail.com)
  - ii. Puxe cada correia branca com a mão para garantir que está apertada e que a cama Safe Place permanece no meio da cama estacionária.
  - iii. Puxe o fecho quando fechar a cama Safe Place.
4. Se vir algum problema, não utilize a cama e contacte [safeplacebedseu@gmail.com](mailto:safeplacebedseu@gmail.com)

## MANTENHA-SE SEGURO ENQUANTO USA O SEU COFRE PLACE BED

1. Inspeccione o cofre para verificar se há danos sempre que o utilizar.
2. Fale com o seu médico antes de utilizar uma cama Safe Place se o seu filho tiver menos de 36 meses de idade ou tiver baixo tónus muscular. Risco de asfixia.
3. Por favor, monitorize a criança/utilizador de perto quando aceder ao exterior da Cama Safe Place. O risco pode incluir, mas não está limitado a, asfixia de correias, sufocamento no zíper.
4. Sem fumar ou fontes de calor perto de Safe Place Bed
5. Mantenha a cama Safe Place longe da água, não é um dispositivo de flutuação.
6. Mantenha objetos cortantes longe da cama Safe Place, furos não são cobertos pela garantia e podem prejudicar a criança.
7. Este produto não é um brinquedo.
8. Consulte sempre o seu médico antes de utilizar este produto

## Contacte-nos:

[www.safeplacebedseu.com](http://www.safeplacebedseu.com)

[safeplacebedseu@gmail.com](mailto:safeplacebedseu@gmail.com)

+447782105085