




SAFE PLACE BETT ANWEISUNGEN



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH: VERWENDEN SIE EIN FEUCHTES TUCH, UM DIE KLAREN, SCHWARZEN UND WEIßEN TEILE JEDES VENTILS VORSICHTIG ABZUWISCHEN.

SCHRITT 1

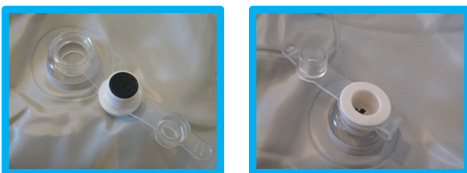

Blasen Sie das Safe Place Bed mit geschlossenen und verriegelten Reißverschlüssen auf und entleeren Sie sie. Stellen Sie das Safe Place Bett auf ein stationäres Bett, das mindestens 190 cm lang und 135 cm breit ist.

Setzen Sie das weiße Ventil in das durchsichtige Kunststoffloch ein. Vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingesteckt ist. Wiederholen Sie den Vorgang für alle vier Ventile.

SCHRITT 2



Blasen Sie alle vier Bereiche des Safe Place Bettes auf. Jeder aufblasbare Teil des Bettes sollte fest, aber nicht hart sein.

Achten Sie darauf, das Bett nicht zu stark aufzublasen, sonst erlischt die Garantie!

SCHRITT 3



Schieben Sie den durchsichtigen Stopfen bis zum Anschlag in das weiße Ventil und schieben Sie dann das gesamte Ventil in das Safe Place Bed.

Wiederholen Sie den Vorgang für alle vier Ventile

SCHRITT 4



Vergewissern Sie sich, dass sich das Safe Place Bett in der Mitte des stationären Bettes befindet. Verbinden Sie ein weißes Band mit einem weißen Clip. Führen Sie den Gurt unter das stationäre Bett und verbinden Sie den weißen Clip auf der anderen Seite des Safe Place Bettes.

Wiederholen Sie den Vorgang am gegenüberliegenden Ende des Safe Place Bettes. Ziehen Sie die weißen Gurte fest, bis

sich das Safe Place Bett nicht mehr bewegen oder umkippen kann.

REIßVERSCHLUSS-VERSCHLUSS



Schließen Sie die Reißverschlüsse am Ende des Bettes mit dem Reißverschlussclip. Befestigen Sie den Clip an beiden Reißverschlüssen und ziehen Sie den Gurt fest, damit die Reißverschlüsse nicht verschoben werden können.

TÄGLICHE INSPEKTION DES SAFE PLACE BETTES VOR GEBRAUCH

1. Überprüfen Sie das Safe Place Bett jeden Tag, bevor Sie das Kind hineinlegen:
2. Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um zu überprüfen, ob sich das Safe Place Bett in der Mitte des stationären Bettes befindet und ob das Netz intakt ist.
3. Führen Sie eine manuelle Inspektion durch:
 - i. Drücken Sie jeden Teil des Bettes zusammen, um sicherzustellen, dass es noch aufgeblasen ist. Wenn sich in einem Abschnitt Luft entleert hat, reinigen Sie alle drei Abschnitte des Ventils und pumpen Sie es erneut auf. Benutzen Sie das Bett 24 Stunden lang nicht, um sicherzustellen, dass der Abschnitt Luft hält. Wenn sich der Abschnitt wieder entleert, wenden Sie sich an safeplacebedseu@gmail.com
 - ii. Ziehen Sie an jedem weißen Gurt von Hand, um sicherzustellen, dass er fest sitzt und das Safe Place Bett in der Mitte des stationären Bettes bleibt.
 - iii. Ziehen Sie am Reißverschluss, wenn Sie das Safe Place Bett schließen.
4. Wenn Sie ein Problem sehen, benutzen Sie das Bett nicht und wenden Sie sich an safeplacebedseu@gmail.com

BLEIBEN SIE SICHER, WÄHREND SIE IHR SICHERES PLACE BED BENUTZEN

1. Überprüfen Sie den Tresor bei jedem Gebrauch auf Beschädigungen.
2. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie ein Safe Place Bed verwenden, wenn Ihr Kind unter 36 Monate alt ist oder einen niedrigen Muskeltonus hat. Erstickungsgefahr.
3. Bitte beaufsichtigen Sie das Kind/den Benutzer genau, wenn Sie auf die Außenseite des Safe Place Bettes zugreifen. Das Risiko kann unter anderem das Ersticken durch Gurte und das Ersticken am Reißverschluss umfassen.
4. Kein Rauchen oder Wärmequellen in der Nähe von Safe Place Bed
5. Halten Sie das Safe Place Bed von Wasser fern, es ist keine Schwimmhilfe.
6. Halten Sie scharfe Gegenstände vom Safe Place Bed fern, Pannen fallen nicht unter die Garantie und können das Kind verletzen.
7. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
8. Konsultieren Sie immer Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden

Kontaktieren Sie uns:

www.safeplacebedseu.com

safeplacebedseu@gmail.com

+447782105085